



ResMed

AirSense™ 10 AUTOSET

ELITE



Sākuma poga, ar kuras palīdzību jebkurā brīdī iespējams atgriezties Sākuma ekrānā

Poga Start/Stop terapijas uzsākšanai

Grozāma poga navigācijai un opciju maiņai

Gaisa atvere gaisa padeves caurules pievienošanai

Pirms lietošanas izlasiet visu AirSense™ 10 lietošanas instrukciju.

Uzstādīšana




Novietojiet ierīci uz stabilas, līdzenas virsmas.



Ievietojiet strāvas vada spraudni pieslēgvietā ierīces aizmugurē. Strāvas vada vienu galu pievienojiet strāvas padeves blokam, bet otru ievietojiet strāvas kontaktligzdā.



Ievietojiet gaisa padeves cauruli gaisa atverē, kas atrodas ierīces aizmugurē.

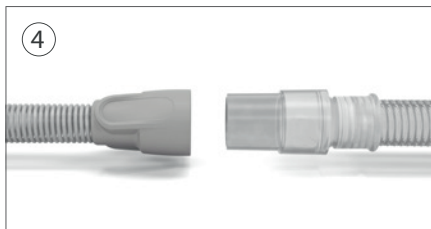

Brīvo gaisa padeves caurules galu stingri pievienojiet apliktajai maskai. Lai uzsāktu terapiju, piespiediet pogu **Sākt/Pārtraukt (Start/Stop)**.

AirSense 10 ar HumidAir

Ja jums ir ierīce AirSense™ 10 ar HumidAir™, uzpildiet gaisa mitrinātāju sekojoši:



Atveriet gaisa mitrinātāju un piepildiet to ar ūdeni līdz maksimālajai atzīmei.



Aizveriet gaisa mitrinātāju un ievietojiet to ierīces sānu daļā.

Karstā gaisa mitrināšana palīdz atbrīvoties no sausuma sajūtas degunā un aizsprostojumiem, un ir paredzēta, lai padarītu terapiju ērtāku. Ja jums nav ierīce AirSense 10™ ar HumidAir™, apsveriet iespēju iegādāties HumidAir™, kā arī ClimateLineAir™ karstā gaisa padeves caurules.

Pielāgošanās terapijai


Ja terapiju pielietojat pirmo reizi, jums, iespējams, būs nepieciešams laiks, lai pie tās pierastu. Lielākajai daļai pacientu vajadzīgas 1-2 nedēļas, lai pierastu pie gaisa spiediena.

Simptomu pārvarēšana, mainot komforta iestatījumus


Ja jums ir grūtības pierast pie terapijas, izmantojiet AirSense™ 10 komforta funkcijas, lai savu ceļu uz labāku miegu padarītu vieglāku.

- **GRŪTĪBAS AIZMIGT** – ja gaisa spiediens sagādā jums grūtības aizmigt, noregulējiet opciju **Laiks, kurā ierīce sasniedz savas darbības maksimālo efektivitāti uz automātisko režīmu (Auto Ramp)** vai arī palieliniet laiku, kurā ierīce sasniedz savas darbības maksimālo efektivitāti (**Ramp Time**).
- **UZPŪŠANĀS SAJŪTA** – ja, ievēlot gaisu, jūs sajūtat vieglu uzpūšanos, noregulējiet opciju **Laiks, kurā ierīce sasniedz savas darbības maksimālo efektivitāti uz automātisko režīmu (Auto Ramp)** vai arī palieliniet laiku, kurā ierīce sasniedz savas darbības maksimālo efektivitāti (**Ramp Time**).
- **SAJŪTA, KA TRŪKST GAISA** – ja jūs sajūtat, ka trūkst gaisa, izslēdziet opciju **Laiks, kurā ierīce sasniedz savas darbības maksimālo efektivitāti (Ramp Time)**, piespiežot pogu **Izslēgt (Off)**.


Lai mainītu laiku, kurā ierīce sasniedz savas darbības maksimālo efektivitāti (**Ramp Time**):

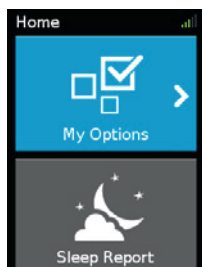


1. Piespiediet grozāmo pogu, lai piekļūtu savām opcijām (**My Options**).

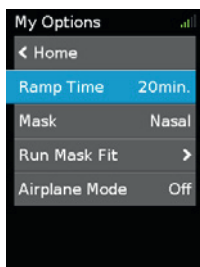

2. Pagrieziet grozāmo pogu, līdz izeimējas opcija **Laiks, kurā ierīce sasniedz savas darbības maksimālo efektivitāti (Ramp Time)**, un, lai to izvēlētos, piespiediet grozāmo pogu.

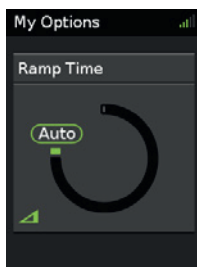

3. Pagrieziet grozāmo pogu, lai uzstādītu jums piemērotāko iestatījumu.

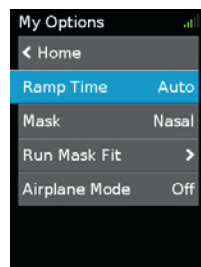

4. Piespiediet grozāmo pogu, lai izmaiņas saglabātu.

Ja jums ir AirSense™ 10 ierīce ar HumidAir™, jums ir pieejamas vairākas komforta funkcijas, kas padarīs terapiju daudz ērtāku.

- **SAUSUMA SAJŪTA DEGUNĀ VAI IESNAS** – ja jums ir sausuma sajūta degunā vai arī iesnas, uzstādiet augstāku **Mitrināšanas līmeni (Humidity Level)**.
- **ŪDENS PILIENI (KONDENSĀTS)** – ja uz jūsu deguna, maskas vai gaisa padeves caurules parādās ūdens pilieni, uzstādiet zemāku **Mitrināšanas līmeni (Humidity Level)**.



ResMed

Tīrīšana

1. Gaisa padeves cauruli mazgājiet siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli. Nemazgājiet to trauku mazgājamajā mašīnā.
2. Gaisa padeves cauruli kārtīgi noskalojiet un ļaujiet tai nožūt vietā, kas pasargāta no tiešiem saules stariem un/vai karstuma ietekmes.
3. Ierīces ārējo virsmu noslaukiet ar sausu lupatiņu.

Ja jums ir ierīce AirSense™ 10 ar HumidAir™, veiciet mitrinātāja tīrīšanu, kā norādīts 1. un 2. punktā.

Detalizētus norādījumus par jūsu maskas tīrīšanu meklējiet savā maskas lietotāja rokasgrāmatā.

Regulāras pārbaudes un detaļu nomaiņa

Jūsu komfortam un veselībai ļoti svarīgas ir ierīces regulāras pārbaudes un detaļu nomaiņa. Regulāra detaļu un piederumu nomaiņa nodrošinās jums optimālu terapiju un pastāvīgu komfortu.

Detalizētus norādījumus par ierīces pārbaudēm meklējiet AirSense™ 10 lietotāja rokasgrāmatā. Informāciju par nomaiņas grafiku varat iegūt, sazinoties ar savu aprūpes nodrošinātāju.

Seriālais numurs	Ierīces numurs
Maskas tips un izmērs	Uzstādīšanas datums
Piezīmes	



ResMed Ltd
1 Elizabeth Macarthur Drive
Bella Vista NSW 2153 Australia

DISTRIBUTED BY
ResMed Corp 9001 Spectrum Center Boulevard San Diego CA 92123 USA
EC REP ResMed (UK) Ltd 96 Jubilee Ave Milton Park Abingdon Oxfordshire OX14 4RW UK

See www.resmed.com for other ResMed locations worldwide. For patent information, see www.resmed.com/ip.
AirSense, ClimateLine and HumidAir are trademarks of ResMed Ltd. ClimateLine is registered in U.S. Patent and Trademark Office. © 2014 ResMed Ltd. 378326/3 2014-07



ResMed.com



378326

Pārdevējs: "Remedine" SIA, Rīgā, Grebenščikova ielā 1-101, tālr. 26383300
www.inhalators.lv